


IM-Cure KIT


- Полностью удалить патологически изменённые ткани вокруг имплантата
- Минимизировать повреждение поверхности имплантата
- Обеспечить удобный доступ к зоне костного дефекта

Удаление периимплантита с поверхности имплантата

Этап 1. Макро очистка

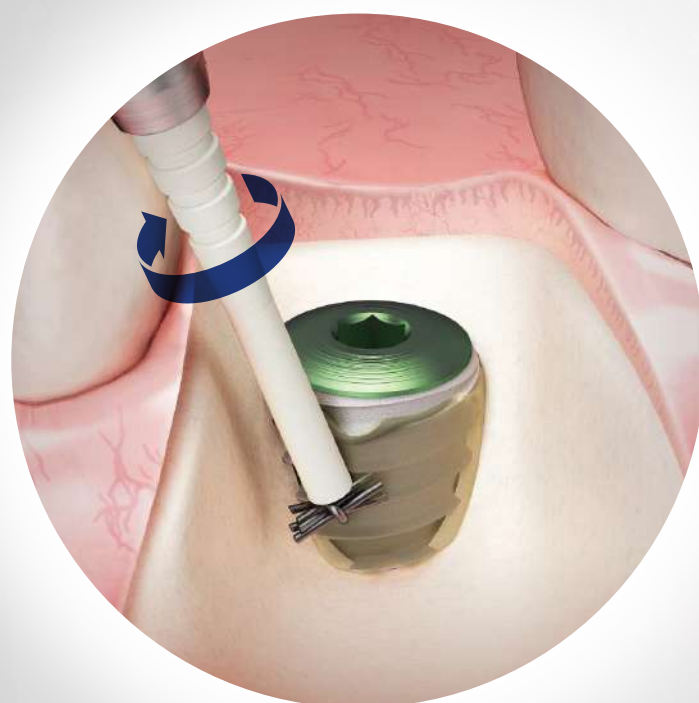


Smart Brush1

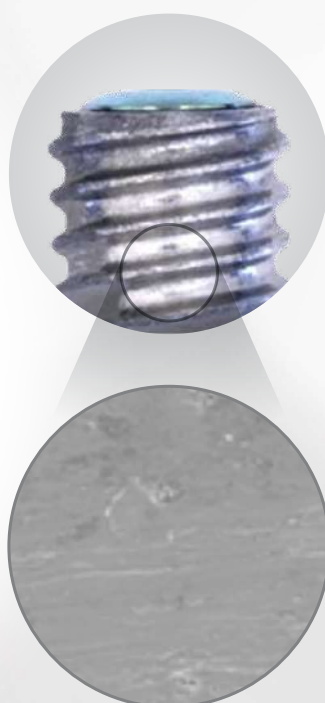


Удаляет более 95% загрязнений

Этап 2. Тонкая очистка

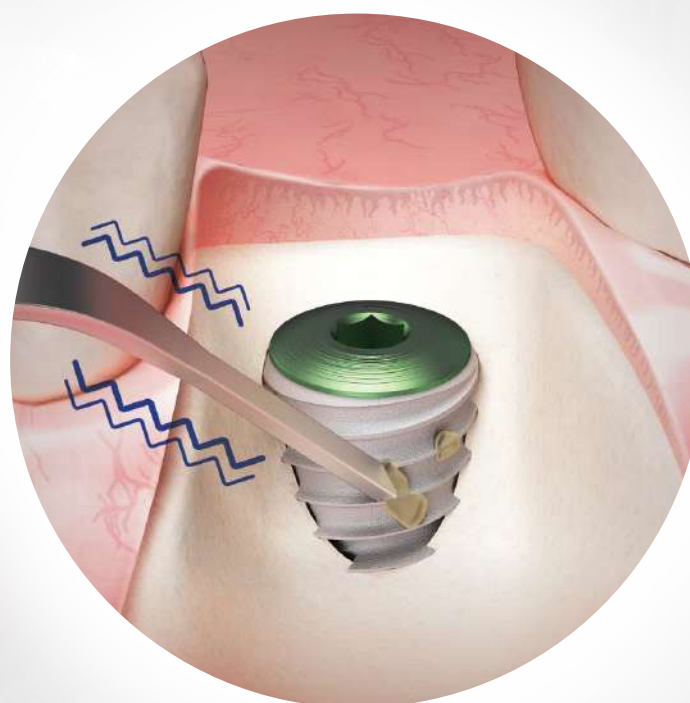

Scaler Tip

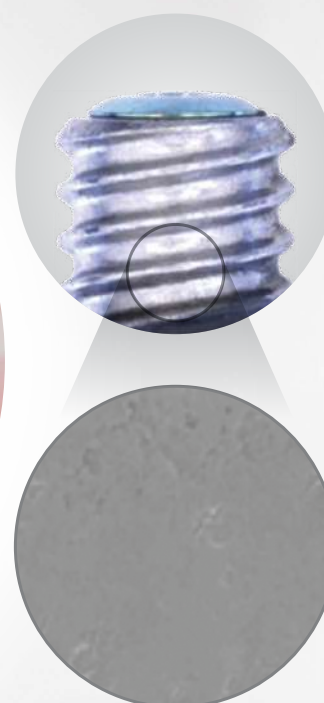

Удаляет оставшиеся 5% загрязнений

Инструменты набора разработаны с учётом геометрии резьбы имплантата, что позволяет эффективно очищать и полировать его поверхность. Благодаря тонкой конструкции рабочей части инструмент обеспечивает удобный доступ к участку дефекта и позволяет тщательно обработать поверхность имплантата даже в труднодоступных зонах

Рабочую часть инструмента можно сгибать, адаптируя её к анатомии и улучшая доступ к зоне поражения

Компоненты IM-Cure KIT

- 1** Зонд (2 шт.)
- 2** Кюрета (3 шт.)
- 3** Smart Brush 1 (3 шт.)
Одноразовый, не использовать повторно
- 4** Smart Brush 2 (2 шт.)
- 5** Металлическая насадка для скалера (3 шт.)
Изгибание
- 6** Наконечник для скалера с пластиковыми насадками (3 шт.)
- 7** Пластиковая насадка для скалера (30 шт.)
Одноразовая, не использовать повторно

Хирургический протокол

Удаление периимплантита




1 Зонд

С помощью пародонтального зонда провести обследование имплантата и оценить наличие признаков периимплантита



2 Кюрета


С помощью кюреты удалить грануляционную ткань из области периимплантационного дефекта

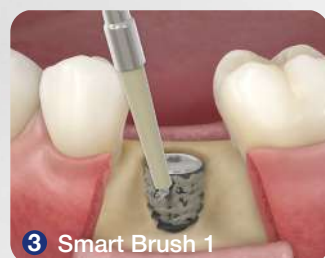

3 Smart Brush 1

Провести макрополировку поверхности имплантата с помощью Smart Brush 1

или

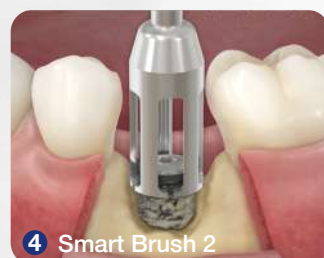

4 Smart Brush 2

В случае вертикальной резорбции кости вокруг имплантата использовать Smart brush 2



5 Металлическая насадка для скалера

После макро очистки провести более тщательную обработку поверхности имплантата с помощью металлической насадки для скалера

Удаление перимукозита



1 Зонд

С помощью пародонтального зонда провести диагностику перимукозита



7 Пластиковая насадка для скалера

Проведите полировку ортопедической конструкции с помощью **пластиковой насадки для скалера**. Пластиковая насадка не должна использоваться на поверхности имплантата