

122 Taper KIT

НОВИНКА 2018

Область применения

TSIII


TSIV

ETIII

Набор для установки конических имплантатов TSIII, TSIV, ETIII

- Упрощенный протокол и специально разработанные сверла сокращают время операции - формирование ложа под имплантат за 2 этапа сверления
- Ступенчатый дизайн фрез предусматривает прохождение нескольких диаметров за один этап сверления без перегрева кости
- Верхняя часть сверла 122 выполняет функции сверла-коронки и удаляет слой кортикальной кости
- Пилотное сверло 122 включает функции пилотного и бокового сверла

Динамометрический ключ
TW30B

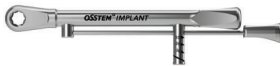

Глубиномер
OSDG

